

Двухкомпонентная система для ухода за стомой

Соберите принадлежности




Возьмите мешок, кожный барьер, пакет для утилизации, салфетку и (или) кусок ткани для очистки и воду. Дополнительно: ножницы, ручка, измерительный инструмент и (или) принадлежности.

Подготовьте кожный барьер и мешок



Перед каждым применением барьера измеряйте стому с помощью инструмента для определения размеров стомы (при использовании барьерного отверстия предварительно заданного размера переходите к шагу 7).

Удалите использованную систему для ухода за стомой

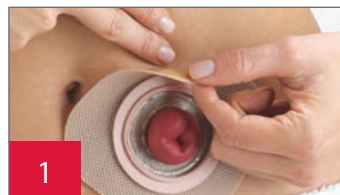

Осторожно приподнимите край адгезивной пластины и потяните вниз, аккуратно отодвигая кожу от кожного барьера. Надлежащим образом утилизируйте использованный мешок и кожный барьер. Смыть в унитаз запрещено!

Очистите и высушите кожу



Очистите кожу водой или мягким мылом в соответствии с рекомендациями квалифицированного работника здравоохранения. Тщательно промойте и высушите. Не наносите на кожу масла, присыпку, лосьон или жидкое мыло.

Проверьте состояние кожи



Удостоверьтесь, что кожа вокруг стомы (перистомально) не повреждена, на ней отсутствует раздражение, сыпь или покраснение*.

* Свяжитесь с вашей медсестрой WOC/NSWOC, если обнаружите раздражение, сыпь или покраснение.



Обведите барьерное отверстие нужного размера на кожном барьере. Кожный барьер должен подходить к месту пересечения кожи и стомы. Удостоверьтесь, что между кожным барьером и стомой не видно кожи, чтобы предотвратить утечку и раздражение кожи.



Используя маленькие изогнутые ножницы, осторожно прорежьте отверстие в кожном барьере, чтобы оно соответствовало нанесенному рисунку. При вырезании не выходите за линию на защитной пленке.



Снимите защитную пленку с кожного барьера.

Нанесите пасту или добавьте кольца при необходимости



При необходимости приложите барьерное кольцо или нанесите каплю пасты вокруг отверстия, следуя инструкциям по применению.


Разместите новую систему для ухода за стомой



Разместите отверстие кожного барьера над стомой в форме ромба. При наличии окантовки из клейкого материала удалите защитную бумагу с обеих сторон и прижмите клейкую сторону к коже.




Слегка надавите на кожный барьер примерно на минуту для обеспечения более надежной адгезии.

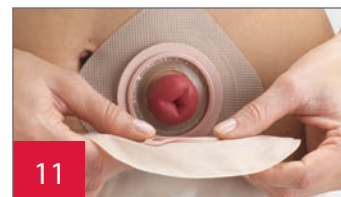

Прикрепите мешок к кожному барьеру, сцепив нижние края фланца мешка и фланца кожного барьера.

Сожмите вместе два фланца. Серия «щелчков» подтвердит, что вы сделали это правильно. Прекращение «щелчков» означает, что мешок надежно закреплен.

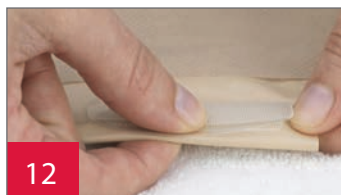

Закройте дно мешка. При использовании дренажного мешка закройте застежку **Lock 'n Roll** в нижней части мешка или примените зажим для мешка. Более подробную информацию о том, как использовать данную систему закрытия, см. в разделе *Советы по уходу за застежкой Lock 'n Roll*.



При использовании уростомного мешка удостоверьтесь, что сливной клапан закрыт. Капля на сливном клапане должна быть обращена к стороне мешка, обращенной к телу.

При желании закройте крышку, находящуюся в коробке.

Двухкомпонентная система для ухода за стомой

СОВЕТЫ	СПИСОК ПРОДУКТОВ	АРТИКУЛ	
<ul style="list-style-type: none">• На коже вокруг стомы не должно быть признаков сыпи или повреждений.• Квалифицированный работник здравоохранения должен выполнить оценку раздраженной кожи.• При использовании барьерного кольца или пасты нанесите их на липкую сторону кожного барьера рядом с отверстием стомы в соответствии с указаниями.• Ваша стома, вероятно, будет отечной после операции. Может потребоваться от нескольких недель до месяцев, чтобы стома уменьшилась до постоянного размера.• Стома может немного кровоточить при ее очистке.• Использование защитных салфеток для кожи под кожными барьерами длительного ношения не рекомендуется, потому что это может уменьшить время ношения.	Двухкомпонентная система для ухода за стомой		
	Кожный барьер	_____	
	Мешок	_____	
	Принадлежности		
	Барьерные кольца	_____	
	Бандаж для стомы	_____	
Паста	_____		
Смазывающий дезодорант	_____		
Присыпка для ухода за стомой	_____		
Прочее _____	_____		

Дополнительные инструкции

Перед прикреплением кожного барьера кожа должна быть очищена и высушена.

Обязательно прочтите инструкцию по применению перед использованием, чтобы получить информацию о назначении, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожности и инструкциях.

Логотип компании Hollister, Lock 'n Roll и «Здоровая кожа. Положительные результаты.» являются товарными знаками компании Hollister Incorporated.
© Hollister Incorporated, 2022. 923081-1118 ANZ Russian-2P

Hollister Australia
PO Box 375,
Box Hill, VIC 3128
www.hollister.com.au

Customer Care
1800 880 851
priority@hollister.com.au

Hollister New Zealand
PO Box 107097,
Auckland Airport, Auckland 2150
www.hollister.co.nz

Customer Care
0800 678 669
NZCustomerService@libmed.co.nz